

JP4035642





BEST AVAILABLE COPY



BIOMAGNETIC MEASURING EQUIPMENT

Patent Number:

JP4035642

Publication date:

1992-02-06

Inventor(s):

SHIBATA KENJI

Applicant(s)::

SHIMADZU CORP

Requested Patent:

□ JP4035642

Application Number: JP19900144037 19900531

Priority Number(s):

IPC Classification:

A61B5/05

EC Classification:

Equivalents:

JP2844848B2

Abstract

PURPOSE:To obtain a three-dimensional positional relation between a region to be measured and a micromagnetic sensor easily by providing a display means or the like of the position and the direction of a micromagnetic measuring means on a three-dimensional image. CONSTITUTION:In a first step 21, a large number of tomographic images of the head of a subject are obtained with an MRI equipment 5, and those image data are inputted to a computer 3. Then in a step 22, the computer 3 constructs a three-dimensional image of the head such as a three-dimensional image of cranial epidermis or cerebral cortex from the image data of the tomographic images. Thereby a three-dimensional relation of the position and the direction of the magnetic measuring point to the subject can be obtained easily to position the measuring point accurately. When the magnetic measurements are carried out with a micromagnetic measuring means after obtaining the measuring position and direction on the three-dimensional image of the subject, and current dipoles are calculated with the measured data, more accurate estimations can be obtained.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

E5243

@日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

②公開特許公報(A) 平4-35642

@Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)2月6日

A 61 B 5/05

A 8826-4C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

の発明の名称 生体磁気計測装置

②特 願 平2-144037

②出 願 平2(1990)5月31日

饲発明者 芝田

健 治

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製

作所三条工場内

团出 願 人 株式会社島津製作所

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

個代 理 人 弁理士 佐藤 祐介

明細書

1. 発明の名称

生体磁気計測装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 做小磁気測定手段と、該做小磁気測定手段の 被検者に対する3次元的な位置・方向を入力する 手段と、上記被検者の断層像を撮像する断層機像 手段と、該多数の断層像から被検者の3次元画像 を作成する手段と、該3次元画像上で上記の微小 磁気計測手段の位置・方向を表示する手段とを偏 えることを特徴とする生体磁気計測装置。
- 3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

この発明は、人間の脳などにおいて発生する磁界を計測することによって、脳の活動部位の推定などを行う生体磁気計測装置に関する。

【従来の技術】

従来より、微少な磁気を計測するセンサとして、SQUID (Superconducting Quantum Interference Device: 超電導量子干渉型デバイス) センサが

知られている。そこで、このSQUIDセンサを 用いて人体から発生する微少な磁気を計測するこ とが行われている。とくに人間の脳において発生 する磁界を計測することにより脳活動部位の位置 を求めることは、てんかんの位置推定、自発脳磁 (とくにα液)の研究、請発脳磁の研究等、臨床 医療に応用されている。

このような生体磁気計測において、測定対象部位のどの位置にどの方向から SQUID センサを



特閒平4-35642《2》

あてて、どの位記・方向で磁気を計測したかを正確に把握することは非常に重要である。

そのため、従来では被検者の体表面あるいは特定部位の平面哈郭画像上にセンサの位包を表示するようにしている。

【発明が解決しようとする認題】

しかしながら、上記のように単に被検者の体表 面あるいは特定部位の平面論評画像上にセンサの 位置を表示するだけでは、不十分であり、実際に 即した測定対象部位とセンサとの3次元的位置関係の把握ができないという問題がある。

この発明は、測定対象部位と微小磁気センサとの3次元的位置関係の把握が容易にできるよう改替した、生体磁気計測装置を提供することを目的とする。

【観題を解決するための手段】

上記目的を遊成するため、この発明による生体 磁気計測装置においては、微小磁気測定手段と、 該微小磁気測定手段の被検者に対する3次元的な 位置・方向を入力する手段と、上記被検者の断別

位置・方向を把握した上で上記微小磁気計劃手段 によって磁気計劃し、その計測データを用いて電 流双極子を算出すれば、より正確な推定ができる。

【実施例】

以下、この発明の一英施例について図面を参照しながら詳細に説明する。第1図に示すように、この発明の一実施例にかかる生体磁気計測装置は、SQUIDセンサ1と、データ収集装置2と、コンピュータ3と、3次元座限入力装置4と、MRI装置5と、CRTディスプレーなどの表示装置6と、磁気ディスク、光ディスク等の記録装置7とから格成される。

つぎに脳壁計測する場合の効作を第2図の助作 フローチャートを参照しながら説明するとと、り 最初のステップ21で、MRI接置5により被 者の頭部の多数の断層像が超影され、その ののではエータ3に取り込まれる。つぎにス テップ22でコンピュータ3が、この多数の断層 像を表す画像データより、たとえば第3図で示す ような頭表皮3次元画像や第4図で示すような 優を超像する断唱摄像手段と、該多数の断層像から被検者の3次元画像を作成する手段と、該3次元画像上で上記の微小磁気計測手段の位置・方向を表示する手段とが備えられている。

【作 用】

3次元的な位置・方向を入力する手段により、 微小磁気測定手段の被検者に対する3次元的な位 記・方向が入力される。

他方、断層撮像手段によって得た断層機のデータから被検者の3次元画像が作成される。

そこで、微小磁気計測手段の被検者に対する3次元的な位包・方向と、被検者の3次元画像との間の位置関係が計算でき、この微小磁気計測手段の位置・方向を3次元画像上で表示することができる。

そのため、微小磁気計測手段の位置・方向、つまり磁気計測点の位配・方向の被検者に対する3次元的な把握が容易になり、正確に測定点を位配決めすることができる。

このようにして被検者の3次元画像上での測定

脳皮質3次元画像などの頭部の3次元画像を作成 オス

つぎにSQUIDセンサ1を用いて頭部各測定 占における脳磁界の測定を行うが、それに先だっ て、ステップ23において3次元座標入力装置4 を用いて頭部特徴点の3次元座標及びSQUID センサのコイルの3次元位置・方向を入力するこ とにより頭部とセンサとの位置関係の計測を行う。 この3次元座祭入力装置は、発信器側で3畑直交 コイルを用いて直交3站方向に磁場を形成し、そ の磁場中に3軸直交コイルを有する受信器を置い て3臼方向の磁場強度を計測することにより、磁 場による庭交3次元座標における受信器位置を求 めることを原理とするものである。たとえばこの 発信器をSQUIDセンサ1が収納されたデュワ 一の外側面の適当な位置に取り付け、デュワー内 部のセンサのコイルの位置及び方向を表す点を、 デュワー外側面において受信器で指定する。これ により、発信器からの磁場による3次元座邸系で のコイルの位包・方向(測定点位置・方向)が求





特開平4-35642(3)

められる。また、受信器を頭にはには のより、発信器がものはよる。のでは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののが、 ののは、 ののが、 のので、 の

この例ではSQUIDセンサ1は7つの検出コイルを有する7チャンネルのものであるとして、7つのセンサ(コイル)の位配が算出され、その像が第3図や第4図のように顕都の3次元画像上に表示される。すなわち、第3図では頭殺皮の3次元像31の上にセンサ像32が尋ねて表示されており、これがA(正面)、B(左側面)、C(音面)のように多方向からの像として、回 気示

される・また、第4図ではセンサ銀32を大脳皮質3次元画銀33に重ねて表示するとともに、A(正面)、B(左側面)、C(背面)などと多方向から回窓表示している。このように頭部の3次元画像上にセンサ像32を表示しているため、測定対象部位たる頭部に対するセンサ1の位置・方向を立体的に捉えることが容易になる。なが位置は、右手首刺激の誘発脳磁計測のためのものである。

こうして潮定点の位包・方向が正確に把握すの心を上で、SQUIDセンサ1によって過出界の御定が行われる(第5図のステップ54)た介ではデータはデータ収象装置2を介してついて、頭に位置的に正確に関辺付けられることなる。一方、コンピュータ3では、第5図に示すように、MR像51から類部に近似する適当なモデルが作成され(ステップ52)、つぎのステップ53でそのモデルとセンサ1(脳磁データの測定点)と

の位置関係が計算される。そして、ステッ定を関係が計算される。そして、ステッ定を関係をと、ステッ定を関係と、ステッ定を関係により、大力の大きなが、大力の大きなが、大力の大力を関係を受け、大力の大力を関係を受け、大力の大力を関係を受け、大力の大力を関係を受け、大力の大力を関係を受け、大力の対象を使い、大力を受け、大力を受け、大力を受け、大力を受け、大力を受け、大力を受け、大力を使い、大力を使い、大力を使い、大力を使い、大力を使い、大力を使い、大力を使い、大力を使い、大力を使います。大力を使い、大力

【発明の効果】

この発明の生体磁気計測装置によれば、測定対象部位と微小磁気測定手段との3次元的位置関係把握が容易にできるので、測定対象部位に対して測定点を正確に位置決めでき、測定の箝度を向上させることができる。


4. 図面の簡単な説明


第1図はこの発明の一実統例にかかる全体シス

テムを示すブロック図、第2図はセンサ位置表示に関する第1図のシステムの動作を説明するためのフローチャート、第3及び第4図は表示例を示す図、第5図は電流双極子の推定・表示に関する第1図のシステムの動作を説明するためのフローチャートである。


> 出頭人 株式会社岛津製作所 代理人 弁理士 佐藤 祐介



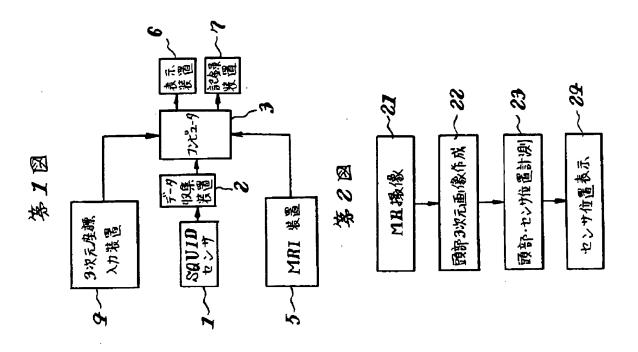

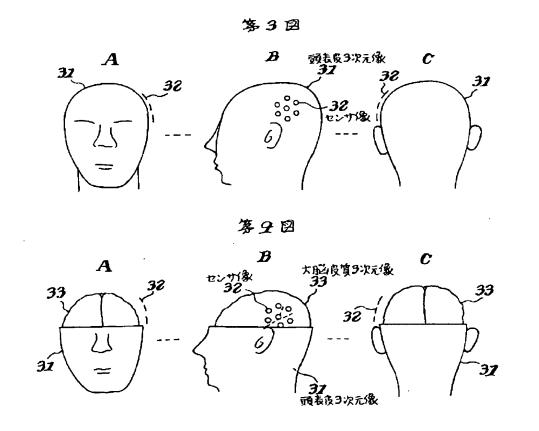

第万国

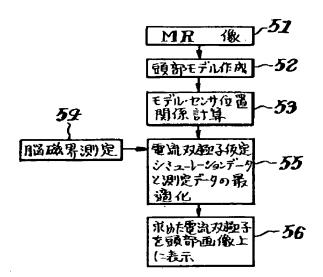

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.